

Новинка

SITVue™

Система детекции с ДАБ

Скорость
лучше

Результат
менее чем за

30
минут

Система детекции SITVue™/DAB – это мощная система интенсификации, которая значительно усиливает хромогенное окрашивание. Эта система может быть использована в стандартных методиках ИГХ-окрашивания.

Система детекции SITVue™/DAB использует пероксидазу хрена (HRP), чтобы выявить отложения двух разных линкеров, последовательно нанесенных на срезы тканей или клеточный препарат. Отложения линкеров можно выявить с помощью конъюгата стрептавидин-пероксидаза с последующей реакцией с хромогеном ДАБ.

В результате использования этой системы значительно увеличивается чувствительность по сравнению с обычными методиками окраски при сохранении аналогичной специфичности.




Быстрый
Результат
за 30 мин.


Универсальный
Оптимизирована для
концентратов и готовых
к использованию
ИГХ антител
от DBS

Надежный
Значительное
увеличение
интенсивности
окрашивания

Система детекции SITVue™/DAB

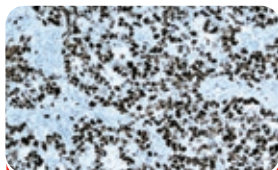


Ki67

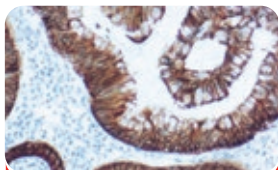


Пан-цитокератин

2-шаговая система детекции

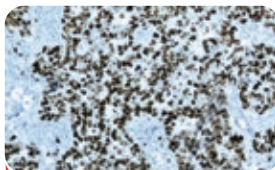

Ki67

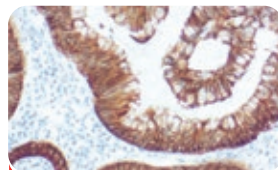

Пан-цитокератин

БИОМЕДИКАЛ СИСТЕМС
BIOMEDICAL SYSTEMS



Diagnostic
BioSystems